

s-max

s-max – de traplift voor uw rolstoel

Met uw eigen rolstoel – veilig en comfortabel de trap op en af.

s-max



Ideen bewegen mehr

s-max – de traplift voor uw rolstoel

De voordelen voor uw mobiliteit.



- U kunt met uw rolstoel nóg makkelijker de trap op en af.
- De s-max past op haast alle in de handel verkrijgbare rolstoelen. Dus ook op heel smalle kinderrolstoelen.
- Dankzij het nieuw ontwikkelde modulaire fixeersysteem is de s-max eenvoudig te monteren.
- Door het nieuw ontwikkelde liftelement met de lage lastwisseling is de s-max gemakkelijk en zeer veilig te bedienen.
- De handgreep is telescopisch. Hij is gemakkelijk regelbaar in de hoogte zodat u altijd een goede houding hebt.
- Handgrepen en bedieningsunit zijn volgens de allernieuwste ergonomische inzichten geconstrueerd.
- De stijgsnelheid kan geheel naar wens worden ingesteld en dus helemaal aan de verplaatsingssituatie worden aangepast.
- Het trede per trede systeem zorgt voor optimaal bedienings- en verplaatsingscomfort zodat u zich op alle trappen behoedzaam en veilig kunt verplaatsen.
- Het uitstekend doordachte veiligheidsprincipe van de s-max omvat ook remmen die automatisch bij iedere traprand geactiveerd worden.
- Omdat de s-max slechts met een steunelement werkt, is het apparaat bijzonder compact en ook uitstekend geschikt voor smalle trappen en wenteltrappen.
- De s-max functioneert op iedere trap; het doet er niet toe of ze van hout, steen of marmer is en of ze met tegels of vloerbedekking is belegd. De gevoelige trapranden worden niet beschadigd.
- De krachtige accu's hebben heel wat uithoudingsvermogen. Met de s-max kunnen dan ook ongeveer 300 treden worden beklommen.
- De elektrische leidingen lopen aan de binnenzijde en kunnen dus niet worden beschadigd.
- Dankzij de compacte afmetingen en het geringe gewicht is de s-max uw ideale begeleider in het leven van alledag.




„Eenvoudig, comfortabel en makkelijk – met de s-max vormen trappen geen belemmering.“



Zelfs in het kleinste voertuig heeft de s-max plaats. Hij kan dus altijd en overal mee naar toe worden genomen, zodat de bezitter altijd mobiel is.



Altijd en overal veilig en betrouwbaar: de automatische veiligheidsremmen worden bij iedere traprand vanzelf geactiveerd.

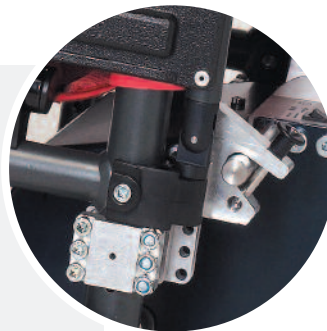

De s-max kan dankzij het modulaire fixeersysteem op vrijwel iedere rolstoel worden gemonteerd. Ombouwen of aanpassen van specifieke rolstoelen is eveneens mogelijk.



Eenvoudig en snel. Het fixeersysteem voor de s-max hoeft slechts één keer op de rolstoel te worden gemonteerd. Daarna kan de traphulp wanneer u het wenst met behulp van een snelsluiting stevig en veilig op de rolstoel worden aangebracht. Vervolgens volstaat het de steekaswielen te verwijderen en het systeem is gebruiksklaar.

s-max



„Ik kan nu al mijn vrienden bezoeken, waar ze ook wonen.“

s-max – de traplift voor uw rolstoel

Barrières overwinnen. Thuis, op school en in de vrije tijd.



Zeer mobiel zijn betekent juist voor kinderen ook meer levenskwaliteit. Daarom hebben we de s-max zo ontwikkeld dat hij ook op de compacte rolstoelen voor kinderen past. Een voordeel dat vrijwel geen enkele andere traphulp biedt.

In de speel tuin, op school, op weg naar de muzieklles voor de s-max is iedere trap kinderspel. Hij past in de kofferbak van iedere auto en maakt u en uw kind in vrijwel iedere situatie zonder meer mobiel. En dat betekent voor u en uw kind optimale levenskwaliteit. Want uw kind kan zonder problemen naar zijn vriendjes toe en het contact met hen onderhouden.

Overwin barrières, geniet van de vrijheid iedere trap altijd en overal zonder problemen en absoluut veilig te bestijgen. Dankzij de grote capaciteit van de accu van de s-max (tot 300 traptreden) kunt u ook langere uitstapjes ondernemen. En u kunt de s-max zelfs ook onderweg via de stroomvoorziening van uw eigen auto en de hiertoe voorziene laadkabel bijladen.



Ook buiten zorgt de s-max voor de mobiliteit die voor het kind nodig is om zich te kunnen ontwikkelen.



Ergonomisch: de belangrijkste bedieningselementen zijn steeds binnen handbereik zonder dat de rolstoeler zich hoeft om te draaien.

Dankzij de krachtige accu's zijn ook lange trappen voor de s-max geen probleem.



*„Aan mijn gewoonten
wil ik vasthouden.“*


s-max - de traphulp voor uw rolstoel

Mobiel blijven in uw normale omgeving.

Blijf mobiel in uw eigen omgeving en doe gewoon wat u altijd al graag hebt gedaan. De s-max is u daarbij behulpzaam en laat u iedere trap zonder problemen "nemen".

De s-max werkt met slechts één enkel steunelement. Daardoor zijn de afmetingen wel héél compact en kan hij ook op smalle trappen en bij smalle rolstoelen worden gebruikt. De bediening is zeer eenvoudig en u heeft er nauwelijks kracht voor nodig.

Op die manier geeft de s-max u de onafhankelijkheid die u ook als rolstoeler of rolstoelster zo graag wenst. En dat geldt niet alleen binnen de eigen vier muren! U kunt de s-max overal mee naar toe nemen, want hij past in iedere kofferbak.

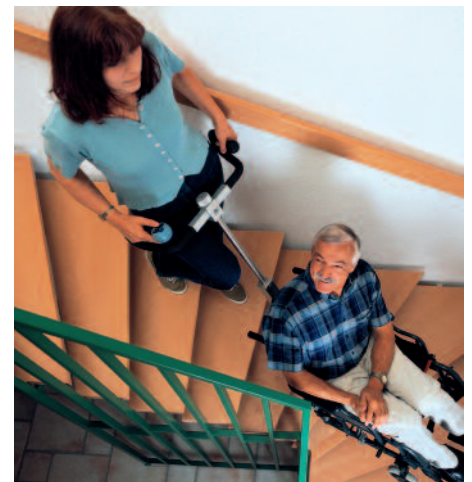

*De "smalspoorder":
de s-max kan zelfs nog op
de allersmalste trappen
worden gebruikt. Ook
wenteltrappen beklimt
hij zonder problemen.*



Het gemak: voor de bediening van de s-max hebt u nauwelijks kracht nodig. De s-max kan dus ook worden gebruikt wanneer de rolstoeler duidelijk zwaarder is dan de bediener.

De truc: omdat de s-max slechts met één enkel steunelement werkt, kon hij zo compact worden geconstrueerd. Desondanks is de s-max in iedere situatie absoluut stabiel.



*„Mijn werk is voor mij de maatstaf.
En niet hoe ik er kom.“*

s-max – de traphulp voor uw rolstoel.

Volledig in het beroepsleven geïntegreerd.



Laat u bij uw werk niet afhankelijk maken van trappen, maar hoogstens van de treden die u voor uw carrière moet bewandelen! De s-max brengt u op iedere werkplek die u bevalt. Geniet dus van deze vrijheid.

Wanneer u naar uw werk gaat past de s-max zonder problemen in de kofferbak van uw auto. En wanneer u hem ter plaatse monteert kan hij makkelijk de hele dag op uw rolstoel blijven zitten zonder dat u in uw werk wordt gehinderd of uw normale bewegingsvrijheid erdoor wordt beperkt. Wanneer u dan de trap op of af moet, kunt u de s-max dus direct gebruiken.

Dankzij de grote capaciteit van de accu en de 300 treden die u daardoor kunt overwinnen, kunt u dus uw normale werkdag zonder problemen doorkomen.

Mobiliteit op het werk. Ook smalle trappen of wenteltrappen vormen op weg naar het werk geen hindernis meer. De s-max helpt u, ook dit soort trappen te "nemen". En het doet er niet toe van welk materiaal de treden zijn gemaakt. Zelfs glad gepolijst marmer is geen probleem.



Geen storend element: de s-max heeft weinig plaats nodig als hij niet in gebruik is.



Snel opbergen: de s-max en de rolstoel zijn met slechts een paar handgrepen al samengevouwd en passen dan in de kofferbak van iedere auto.

s-max – Accessoires

Opties



Universele drager SDM6

Met de universele drager SDM 6 is de s-max compatibel met de meeste rolstoelen; hij is de ideale traphulp bij gebruik in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen als overheidskantoren, musea of theaters.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,5 kg

Geschikt voor rolstoelen met een zitbreedte van ca. 32 tot 60 cm.

Transportstoel U3

Voor mensen die alleen bij het beklimmen van trappen hulp nodig hebben, bieden wij de transportstoel U3. De fixaties voor de montage zijn vast op de U3 gemonteerd en de verbinding met de s-max kan veilig en eenvoudig worden gemaakt. De U3 is bijzonder smal en dus met name geschikt voor gebruik in bijzonder smalle trappenhuisen en op wenteltrappen.

Technische gegevens:

Gewicht: 10,5 kg

Breedte: 49 cm

Heupgordel



Kantelbeveiliging past bij het fixeersysteem van de s-max.



Spanningsomzetter
Hiermee kunt u het laadapparaat ook in uw auto gebruiken.



Opmerking:

Het gewicht van de gebruikte accessoires is inbegrepen in de maximum draagkracht van de s-max (120 kg).

s-max – de traplift voor uw rolstoel

Basisversie

Technische gegevens:

Maximum draagkracht:	120 kg
Accu's:	2 x 12 V – 3,3 Ah
Gelijkstroommotor:	24 V
Stijgsnelheid:	8 – 23 treden (afhankelijk van de belasting)
Capaciteit van de accu (volledig geladen):	maximaal 300 treden (al naar gelang de belasting)
Hoogte van de traptreden:	maximaal 22 cm
Gewicht van het liftelement:	14,5 kg – (zonder accu)
Gewicht van de accu:	3,5 kg
Gewicht van de handgreep:	4 kg
Gewicht totaal:	22 kg
Hoogte:	1200 mm
Handgreep uit te trekken tot:	1650 mm
Breedte van de handgreep:	520 mm
Breedte van het liftelement:	330 mm
Diepte van het liftelement:	320 mm

Standaard accessoires:

Het accupack en het laadapparaat maken deel uit van de levering. Het accupack kan in de s-max worden geladen. Om de accu extern te laden kunt u het pack echter ook in één handomdraai uit de s-max wegnemen.



De s-max voldoet aan de EG-richtlijn 93 / 42 / EEG voor medische producten.

Technische wijzigingen met nadere verbetering als doel voorbehouden.



Ideen bewegen mehr

Euromove Belgique
45, rue du Hameau
BE 1640 Rhode St Genèse
Tel.: 02.358.59.86
Fax: 02.358.59.51
[http:// www.euromove.be](http://www.euromove.be)
e-mail: info@euromove.be

Euromove France
10, avenue de la Créativité
FR 59.650 Villeneuve d'Ascq
Tel.: 0800.86.30.61
Fax: 00322.358.59.51
<http://www.euromove.fr>
e-mail: info@euromove.fr